


Gestión de Pacientes

Para comenzar con la Terapia Visual, lo primero es abrir una ficha a cada paciente, así podremos luego guardar los datos de sus avances en las pruebas y ejercicios. En el menú principal encontramos una pestaña para dar de alta a un **nuevo** paciente o para **buscar** a un paciente ya registrado.

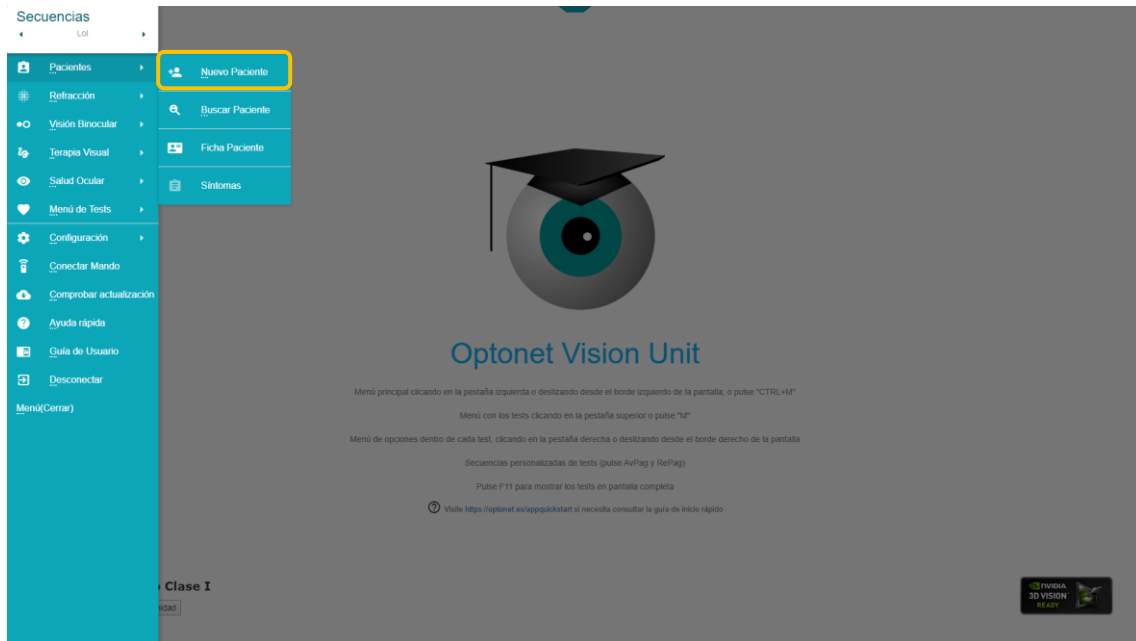


Nuevo Paciente

Pulsando en el enlace de **Nuevo Paciente** podremos abrir una ficha nueva, rellenando los datos de la persona; al pulsar luego en el botón de **Guardar**, quedará todo registrado en la base de datos del programa y el servidor de Optonet.


The 'Nuevo Paciente' form includes the following fields: 'Nombre', 'Apellidos', 'Fecha Nac.' (20/02/1950), 'Sexo' (Hombre), 'Edad' (70), 'Domicilio', 'Código Postal', 'Teléfono', 'Email', 'Profesión', and 'Notas'. A yellow circle highlights the 'Guardar' button at the bottom right.

Buscar paciente ya registrado

Si queremos pasar a la terapia visual con un paciente iremos a **Buscar Paciente** en el menú principal.

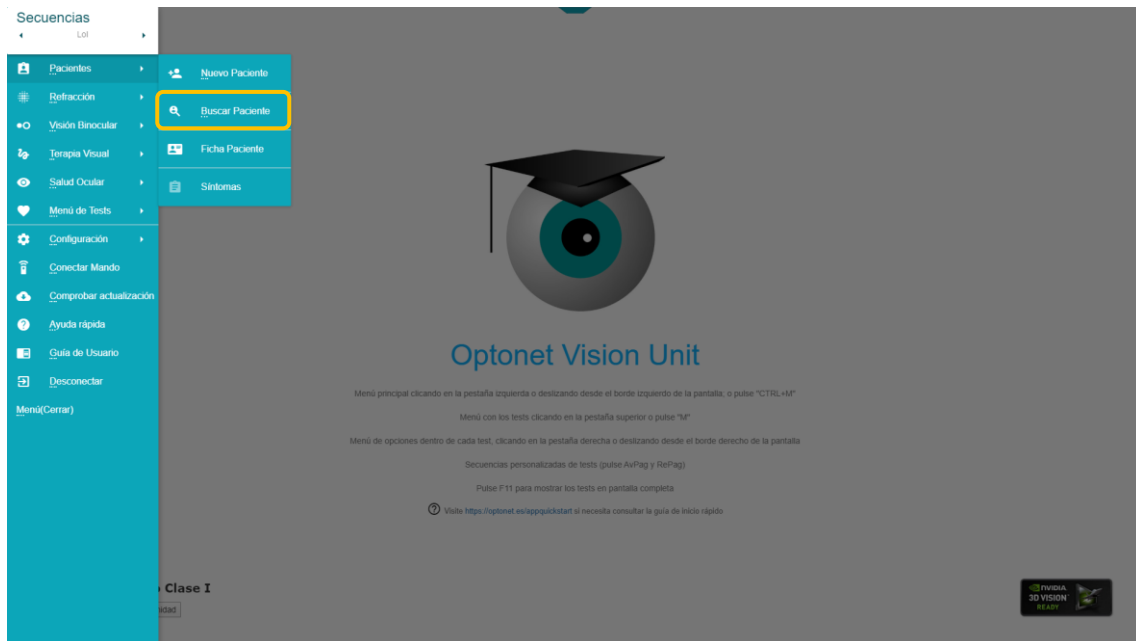

Aquí podremos ver la lista de los pacientes registrados. Seleccionamos el paciente que deseemos, y entonces pulsaremos en el enlace de **Seleccionar**. Se abre entonces una ventana para escribir el nombre del Examinador o Terapeuta (podemos seleccionarlo del desplegable, si ya lo hemos añadido alguna vez).

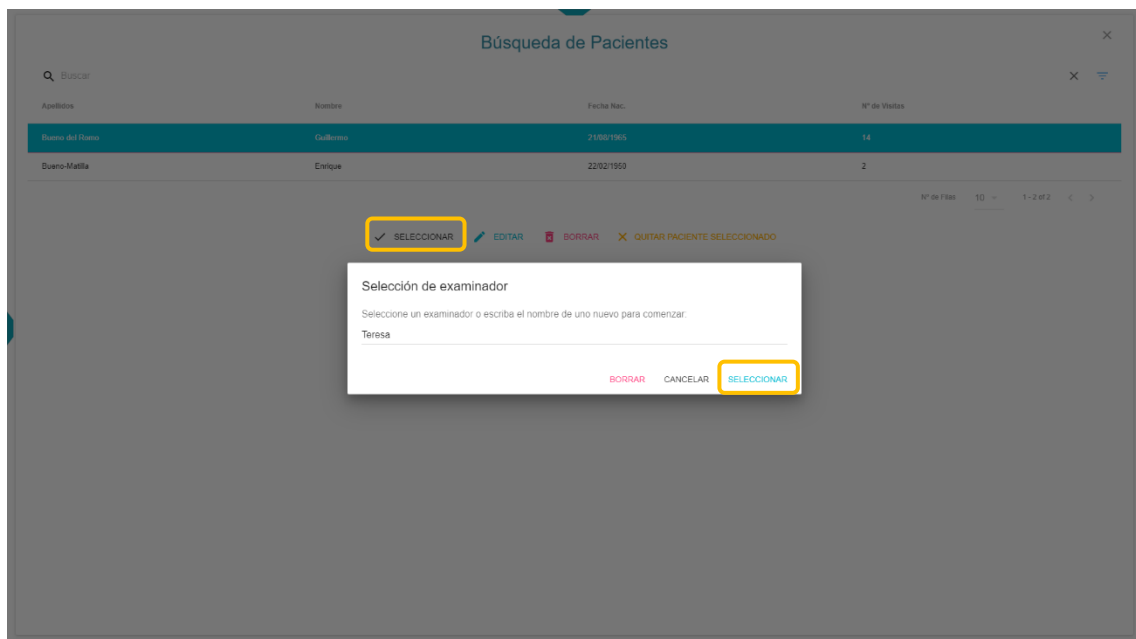

Pulsando de nuevo en seleccionar pasamos a la pantalla de inicio.

Entonces podemos ya elegir los tests de Terapia que nos interesen, sabiendo que los resultados de las pruebas o ejercicios que vamos a hacer se pueden grabar directamente en el historial de ese paciente.

Desde la pantalla de **Búsqueda de Pacientes** se puede eliminar un paciente de la base de datos, teniendo en cuenta que se borrará toda la información asociada a ese paciente. Para ello, con el paciente señalado, pulsaríamos en el enlace de **Borrar**.


Desde esta pantalla también es posible abrir la **Ficha** de un paciente. Para ello señalamos un paciente y pulsamos en el botón de **Editar**.

Por último, desde la pantalla de **Búsqueda de Pacientes** se puede quitar la selección del paciente.

Paciente Seleccionado

Sabemos qué paciente tenemos seleccionado porque aparece su nombre, junto con el del profesional que le trata, en la esquina superior izquierda del menú principal. Así sabemos que los resultados de las pruebas o ejercicios que vamos a hacer ahora se podrán grabar directamente en el historial de este paciente.

Ese botón sirve además para ir directamente a la **Ficha** del paciente y ver qué datos tenemos guardados sobre él.

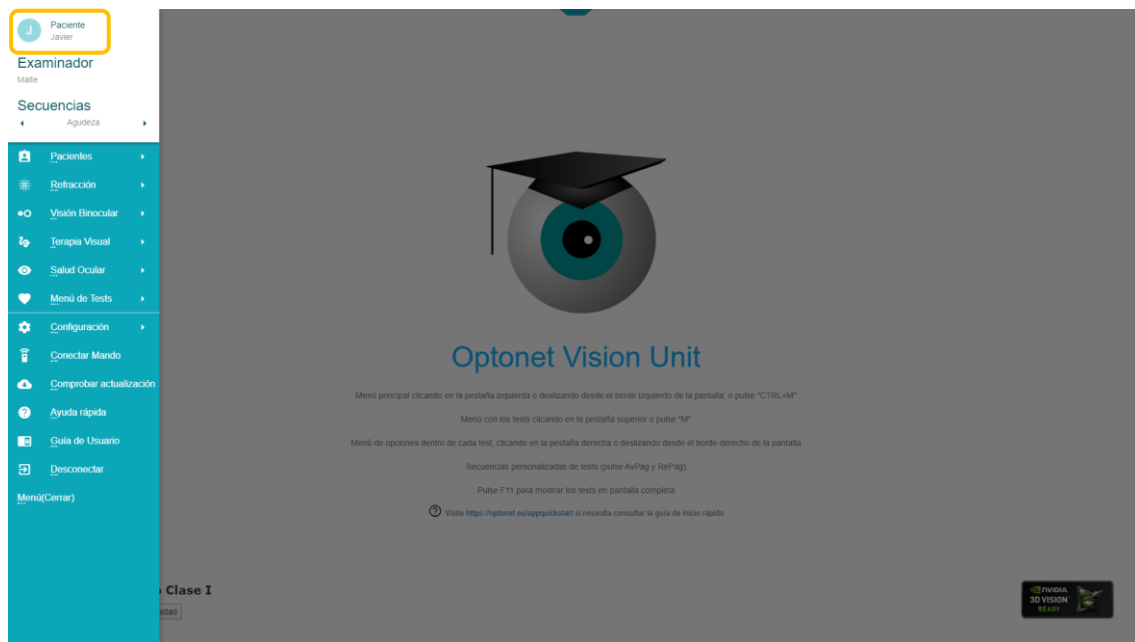

Ficha de Paciente

Los datos del paciente se muestran en la parte izquierda de la primera pantalla, mientras que pulsando en la pestaña de Terapia, podemos acceder a los resultados de las pruebas que vaya completando el paciente.

Un desplegable de **Visita** situado en la parte superior permite acceder a los datos de diferentes visitas, organizados por **fecha**.

The screenshot shows the 'Ficha de Paciente' form with a dropdown menu for 'Visita' set to 'Seleccionar visita...'. The form is divided into two tabs: 'PACIENTE' and 'TERAPIA'. The 'PACIENTE' tab is active, displaying the following information:

Nombre: Teresa
 Apellidos: Matilla Rodríguez
 Fecha Nac.: 21/10/1965 Sexo: Hombre Edad: 54
 Domicilio: 28 Virginia Gardens
 Código Postal: W45 8WN Teléfono: 123456789
 Email: optonet@optonet.org
 Profesión: Optometrista
 Notas:

Junto con los resultados de cada prueba se muestra un botón para **añadir un comentario** y otro para **eliminar ese resultado**.

The screenshot shows the 'Ficha de Paciente' form with the 'Visita' dropdown set to '26 de febrero de 2020'. The 'TERAPIA' tab is active, displaying test results for 'Supresión':

Puntuación	Velocidad	Tiempo	Agudeza	Fijación	Fallos	Aciertos
900	RÁPIDO	30	1.5	OD	0	9

Below the table, there are two buttons: 'BORRAR RESULTADO' and 'AÑADIR COMENTARIO'.